

医療機関専売品


保管用

保証書付き

JMEC

キャリーオンF (キャリーオンエフ)

取扱説明書

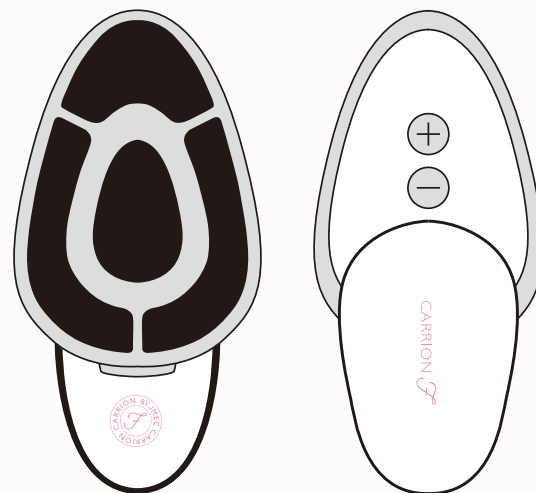

販売元: 株式会社ジェイメック

〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-3湯島東宝ビル

<https://www.jmec.co.jp>

製造元: プランスタッフ株式会社

〒198-0036 東京都青梅市河辺町5-10-1

<https://www.planstaff.co.jp/>

安全にお使いいただくために、ご使用前に
「安全上のご注意(P.02~P.04)」も必ずお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。
保証書は裏面に記載されています。

この度は、「キャリアオンF」をお買い上げいただき、
ありがとうございます。
本製品は、ご家庭でトリートメントを行う為の美顔器です。
この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくご使用ください。

もくじ


- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. 安全上のご注意 | | P.02~P.04 |
| 2. セット内容 | | P.05 |
| 3. 機器各部の名称 | | P.05 |
| 4. トリートメント前の準備 | | P.06~08 |
| 5. トリートメント開始 | | P.09~10 |
| 6. お手入れと保管方法 | | P.11 |
| 7. よくある質問 | | P.11 |
| 8. 故障かな?と思ったら | | P.12 |
| 9. 保証とアフターサービス | | P.12 |
| 10. 仕様 | | P.13 |
| 11. 個人情報のお取り扱いについて | | P.13 |
| 12. 保証規定 | | P.14 |
| 13. 保証書 | | 裏面 |

1. 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、
必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。

 **危険** 「死亡や重症を負うおそれが大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

危険

トラブルを防ぐために

 下記のような医用電気機器や家庭用電気
治療器の近くでは絶対に使用しない

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器
(医用電気機器や家庭用電気治療器の誤作動、
事故や体調不良の原因)

⚠ 警告

肌や身体へのトラブルを防ぐために

⊘ 次に該当する方は、本製品をご使用いただけません

- ・心臓に疾患のある方
- ・ペースメーカーや体内植込み型医用電気機器などをご使用の方
- ・お手入れを行う部位に悪性腫瘍等の症状のある方
- ・血圧に異常のある方 ・痛覚、知覚に障害がある方
- ・顔面に金属、樹脂、シリコン等を埋め込んでいる方
- ・妊娠中の方 ・顔面黒皮症の方
- ・体温38℃以上(有熱期)の方 ・安静を必要とする方
- ・網膜剥離のある方、あつた方 ・強度の近視の方(-6D以上)

⊘ 次に該当する場合、または部位には、本製品のご使用により症状を悪化させる可能性がありますので、ご使用は控えてください

- ・体調がすぐれない ・重度の皮膚アレルギーの方
- ・日焼け、ニキビ、かぶれなどで肌に炎症がおきている
- ・治っていない傷口がある ・悪性腫瘍のある方

! 次のような方は、本製品の使用に関して専門の医師にご相談下さい

- ・最近、医療機関やエステティックサロンでケミカルピーリングやレーザー、光治療、美容外科手術などの治療を受けた方
- ・トリートメント部位とその周辺に手術を受けた方
- ・かゆみなどの肌トラブル、皮膚疾患で通院中の方
- ・肌を敏感にするような薬を服用されている方
- ・授乳期間中の方 ・接触皮膚炎等、皮膚に既往症のある方

◆お手入れに影響する可能性のある病気をお持ちの方、お薬等を服用している場合、ダウンタイム(回復期間)を要する美容手術を受ける場合等は本製品の使用について医師にご相談下さい。

◆肌に異常を感じた場合は、使用を中止し医師にご相談下さい。

口腔内のインプラントや歯の詰め物、歯科矯正器具などの場合は本製品をお使いいただくことができます。

⚠ 警告

- ⊘ 分解・改造・修理をしない。
- ⊘ 眼球(上まぶた)、粘膜、傷口、体内(口腔内以外)に金属やプラスチック・シリコン等を埋め込んでいる部位には使用しない。
- ⊘ 使用時は貴金属類、コンタクトレンズ等は外す。
- ⊘ 肌の弱い方や、使用中に肌トラブルが生じた場合は直ちに使用を中止し皮膚科専門医に相談する。
- ⊘ 電池を飲み込まない。
- ! 電池の取扱については下記事項を厳守すること。
 - ・お子様の手の届かない所に保管する。
 - ・電池を誤って飲み込まない。
 - ・使用済みの電池はお住まいの市町村の指示に従い廃棄する。
 - ・電池を火中に投入しない。
- ⊘ 肌のお手入れ以外の目的で使用しない。

⚠ 注意

- ⊘ 上に重いものを置いたり、
⊘ 推奨時間以上の連続強い衝撃を与えたりしない。
- ⊘ 故障の原因となる恐れがあるため、お手入れ時はシンナー・灯油などの溶剤や薬品類、磨粉等は使用しない。

お風呂でお使い頂く際の注意点(生活防水機能/IPX4)

浴室でのご使用にあたっては以下を必ず守ってお使いください。


- ・浴室及び湿気の多いところでは保管しない
- ・湯船に沈めたりしない
- ・浴室及び濡れる可能性のある場所での電池交換はしない
- ・使用前に電池カバーが確実に閉まっていることを確認し、浴室での使用時は、絶対に電池カバーを開けない
- ・使用後は濡れた状態で放置せず、機器についた水分をふき取る
- ・石鹸や入浴剤入りの湯などがついた場合は直ちにふき取る
- ・サウナでは使用しない

2. セット内容

- 本体 1個
- 保証書つき取扱説明書(本書) 1冊
- コットンリング(付属品) 1個
- 単4電池(消耗品) 2本

3. 機器各部の名称

〈本体〉

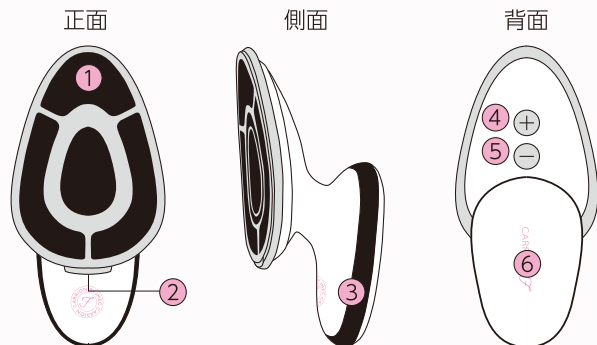

〈付属品〉



〈各部名称〉


- ① イオンプレート
- ② リングストッパー
- ③ アースプレート
- ④ トリートメントボタン(+)
- ⑤ トリートメントボタン(-)
- ⑥ 電池カバー

4. トリートメント前の準備

お手入れ前の肌

アクセサリや眼鏡などの貴金属類を全て外して下さい。
メイクや皮脂汚れをしっかりと落とした後、化粧水・クリームなどを塗布せずにキャリアオンFをご使用ください。

1 電池を入れます

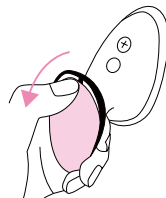

電池カバーの▼を下にスライドし開けます。

2



単4電池2本を使います。マイナス極側をスプリングに正しく押し当てながら入れてください。電池カバーを元に戻します。

〈電池交換の目安〉

1日おき(1回3分)のご使用の場合、電池交換の目安は約9か月です。

- ・電池交換の目安は、満充電の電池を使用した場合です。(付属の電池は動作サンプルのため、約9か月の継続使用を保証するものではありません)
- ・使用済みの電池と新しい電池を一緒に使うことはおやめください。

〈イオントリートメント用化粧水をご使用の場合〉

1. 本体、コットンリング、イオントリートメント用化粧水、コットンガーゼを準備します。




本体



コットンリング



化粧水

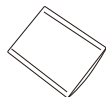


コットンガーゼ


トリートメント効果を高めるため、化粧水はイオントリートメント用のものをご使用ください。

コットンガーゼは、専用品のプレミアムコットンガーゼ(別売)がおすすめです。市販のものをお使いになる場合は、大きさが9.5cm×7.5cm以上のガーゼまたはコットンをお使いください。

2. リングストッパーにコットンリングを固定した状態で、イオンプレートがすべて隠れるようにコットンガーゼをのせます。

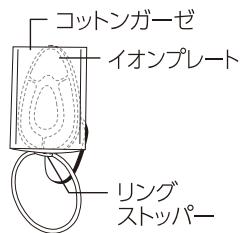

3. コットンガーゼの位置が決まったらコットンリングで固定します。固定されたコットンガーゼの上に化粧水を塗布します。コットンガーゼ全体に十分に化粧水をしみこませてください。化粧水の量が少ないと正しくトリートメントできない場合があります。

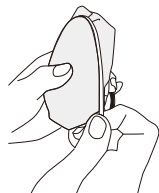

〈イオントリートメント用ジェルをご使用の場合〉

1. 本体、イオントリートメント用ジェルを準備します。



本体




ジェル

トリートメント効果を高めるために、ジェルはイオントリートメント用のジェルを使用してください。

※本体にコットンガーゼをつける必要はありません。
※ご使用方法はジェルの製造販売元のご案内もあわせてご確認ください。

2. イオンプレートに直接ジェルをのせます。(イオンプレートの内側に円を描くようにのせてください)

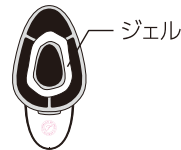


3. 全顔にジェルをのばします。
※ジェルの量が少なく正しくトリートメントができない場合があります。



〈フェイスマスクシートをご使用の場合〉

1. 本体、イオントリートメント用化粧水、フェイスマスクシートを準備します。

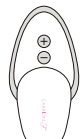

本体



化粧水




フェイスマスクシート

トリートメント効果を高めるため、化粧水はイオントリートメント用のものをご使用ください。

※本体にコットンガーゼをつける必要はありません。

2. フェイスマスクシートにイオントリートメント用化粧水を十分しみ込ませお顔の上ののせます。

3. お手入れはフェイスマスクシートの上から行います。
※化粧水の量が少なく正しくトリートメントができない場合があります。

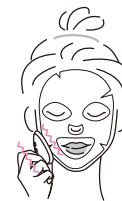


5. トリートメント開始

①アースプレートをしっかり握ります。



アースプレート(黒い箇所)が隠れるように握ります。正しく握れていない場合、トリートメントができません。

②トリートメントボタン(+)または(-)を押します。


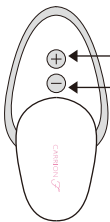


トリートメントボタン(+)
トリートメントボタン(-)

トリートメントボタンは押す回数によって、以下のようにON (LOW)→High→OFFと切り替わります。初めてご使用になるときは、(+)(-)共にLOWパワーに設定することをおすすめします。

トリートメントボタン(+)の場合

トリートメントボタン(-)の場合

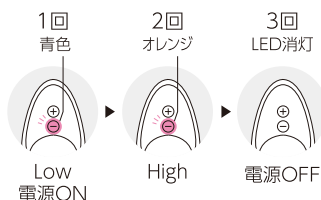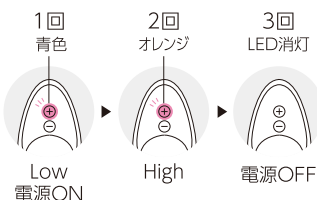

- ・トリートメントボタンを1回押すとLowパワーでのトリートメント開始となります。
- ・Lowパワー時には青色、Highパワー時にはオレンジ色のLEDランプが点灯します。
- ・トリートメント中に(+)(-)の切り替えはできません。トリートメントボタンを切り替えたい場合は、1度電源をOFFにしてから再度、トリートメントボタンを選んでください。

トリートメントボタンの(+)または(-)のどちらを使用するかは、化粧水・ジェルによって異なります。化粧水やジェルの購入先または製造販売元にご確認ください。

- ③イオンプレート全面をお肌に優しく当てて、トリートメントを開始します。
1か所のトリートメント時間は約10秒です。正しく接触できているときは、約10秒間振動が続きます。振動が止まったら、肌から離して次の箇所に移動させてください。
1回のトリートメント時間は全顔で3分です。



正しく接触していないと、短い振動が続き、25秒ほど経つと1秒間の振動の後で自動的に電源がOFFになります。

- ④トリートメント終了
トリートメント開始後3分が経過すると、1秒間の振動の後で自動的に電源OFFになります。

季節や肌の状態などにあわせてお手持ちのクリームなどで保湿してください。



電気の刺激で、一時的に肌が赤くなることがあります。その場合は、Lowパワーにするか、使用頻度を下げることをおすすめします。

6. お手入れと保管方法

ご使用後は、イオンプレートを水で洗い流した後、柔らかい布などで軽く押さえて水分を取ってください。イオンプレートは大変傷つきやすいため、拭いたり、擦ったりしないようにご注意ください。表面を拭いたり擦ったりすると、細かいキズがつき、黒色がつくことがあります。品質には問題なく、引き続きお使いいただけます。

- ・故障の原因となりますので、本体を水に沈めないでください。
- ・湿気やホコリの少ない所に保管してください。
- ・長期間ご使用にならない場合は、本体から電池を取り外して保管してください。

注意!

異常動作の原因となる場合がありますので、絶対に分解・改造などしないでください。

7. よくある質問

Q:きちんとお手入れできているのか不安です。

A:正しくお手入れができているときは、10秒間長い振動が続きます。正しくお手入れができていないときは短い振動が続きます。

Q:毎日使用することは可能ですか？

A:お肌の状態によっても異なりますが、1日おきのトリートメントを目安にしてください。

Q:体感がありますか？

A:本体が振動する他に、口の周り等で刺激(ピリピリ感)を感じる場合があります。

Q:使用中「ピカッ」と光る感じがします。問題はありますか？

A:問題はありません。電気が流れると微弱な光が見えるような現象が起こることもあります。

Q:化粧水、ジェルはなんでも使用できますか？

A:いいえ、イオントリートメントに適した化粧品をご使用いただく必要があります。「イオントリートメント用」など記載がある製品をご使用頂くか、お手持ちの化粧品を使用する場合は、製造販売元にお問い合わせください。

Q:コットンリングをなくした場合はどうすればいいですか？

A:ご購入先の販売店へお問い合わせください。

8. 故障かな?と思ったら

故障のご連絡をいただく前に、まずは下記の点検と対処法をお試しください。それでも症状が改善しない場合は、保証書と本体をご用意のうえ、フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。

症状	考えられる原因	対処法
電源が入らない	1.電池が入っていない	電池を入れる
	2.電池の向きが違う	正しい向きで電池を入れる(P.06ページ参照)
	3.電池が消耗している	新しい電池に交換する 注意:使用済みの電池と一緒に使用しない
すぐに電源が切れる	1.電池が消耗している	
3分間トリートメントできない	1.電池が消耗している	顔の当て方、持ち方を確認する(P.09-10ページ参照) (アースプレートをしっかり握り、イオンプレートを顔に密着させる)
	2.正しく接触していない	
	3.化粧水やジェルの不足	化粧水やジェルを十分に使用する

※正しく接触していないと30秒以内に自動的に電源がOFFになります。(P.10ページ参照)

9. 保証とアフターサービス

保証期間中は、故障に際しましては必ず保証書をご提示ください。保証規定に従って対応させていただきます。規定外のケース、及び保証書の提示がない場合は、保証期間内であっても有償対象となる場合がございます。

**製品の修理及びご使用方法がわからない場合は
下記へお問い合わせください。**

ジェイメック フリーダイヤル(祝日を除く月~金10:00~18:00)



0120-213-877

廃棄について

・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

10. 仕様

製品名	キャリアオンF(キャリアオンエフ)
サイズ	62[W]×122[L]×54[D]mm
重量	約80g(電池を含まない)
使用電池種類	単4乾電池×2本
電池電圧	3V
発振周波数	10kHz
トリートメント出力	Highで約1.2mA相当
イオンプレート/アースプレート材質	シリコンゴム
製造国	日本

11. 個人情報のお取り扱いについて

株式会社ジェイメックは、お問い合わせや故障対応を正確に把握するために、お客様の個人情報を適切に管理しております。お客様の個人情報は、情報開示や共有についてお客様の同意がある場合、及び裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合、または人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合を除き、第三者への開示・提供をいたしません。

12. 保証規定

- ①取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ後1年間、株式会社ジェイメックの判断により無償修理または同等品への無償交換のいずれかを選択し、実施致します。
- ②本体の機能上・性能上の故障のみが保証対象となり、本体のよごれ、傷、摩擦、変形、変色、変質、劣化その他機能・性能に無関係の故障、並びに消耗品及び付属品は保証対象に含まれません。
- ③無償修理期間内に故障して修理を受ける場合には、商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店もしくは、(株)ジェイメックへ依頼してください。保証書に販売店名及びお買い上げ年月日等、必要事項の記載のないものは無効とし、保証期間内であっても有償修理となります。
- ④無償修理期間内でも次の場合には有償修理となります。
 - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
 - ロ) お買い上げ後の落下等による故障および破損。
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および破損。
 - 二) 本書の提示がない場合。
 - ホ) 保証書に販売店による必要事項(お買上年月日・お客様のお名前・販売店名等)の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ヘ) 消耗部品。
 - ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- ⑤保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ⑥この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに無償修理をお約束するものです。従って保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償修理期間経過後の修理等については有償といたします。
- ⑦本保証書は日本国内においてのみ有効です。